



Пружина для выравнивания моляров*
Новинка! 30° предварительная активация

Memory Titanol® Spring for uprighting of the molars*
New! 30° preactivated

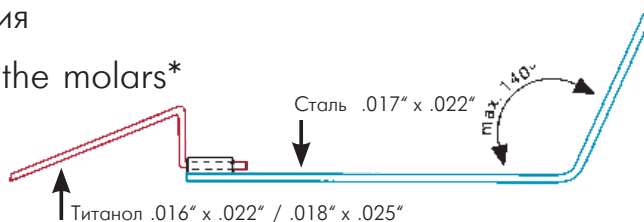

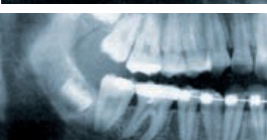

Выравнивающая пружина
Благодаря использованию нитиноловой проволоки создается биологически малая сила, эффективная для выравнивания моляров.





Uprighting spring
By using the superelastic Titanol® wire with its Martensiteplateau a biological favourable low force is effective to the uprighting of the molars.

Пассивное состояние • By-pass-line



Рабочее состояние • working line



Номер No. № 0297		кол-во в уп. contents	описание description
паз .018" 307-1011		10 + 10	Комплект с поперечной трубкой Set with cross tube
паз .022" 307-1013		10 + 10	
паз .018" 307-1010		10	Выравнивающая пружина Uprighting spring
паз .022" 307-1012		10	
паз .018" 760-0062		10	Поперечная трубка для нитиноловой выравнивающей пружины
паз .022" 760-0063		10	Cross tube
.016" x .016" 307-1009		10	Выравнивающая пружина (.016" x .016" – жесткая) Подходит для брекетов Квик Molar-Uprighting spring (.016" x .016" – Stiff) High resilient, for the auxilliary slot of the Quick brackets

*по проф. Сандеру /acc. to Prof. Dr. F. G. Sander